

# SPIG



zdvíhacie zariadenia



# YACK

# SPIG

zdvíhacie zariadenia

## Pripravený na všetky prekážky

YACK N 910  
Koleskový schocholez  
v základnej výbave



**Yack**<sup>®</sup>

SPIG, s.r.o - Tuská 2, 96001 Zvolen  
[www.spig.sk](http://www.spig.sk)

# Konfigurácia

## YACK N 911

Kolesový schodolez s integrovaným sedadlom

Yack N 911 obsahuje nasledujúce komponenty:

- N 910** Telo schodolezu
- N 9121** Integrované sedátko



## YACK N 912

Kolesový schodolez s konzolami na pripojenie invalidných vozíkov

Konfigurácia Yak N 912 obsahuje nasledujúce komponenty:

- N 910** Telo schodolezu
- N 9122** Samostatná konzola pre vozík
- N 9124** Vchrná časť s ovládaním




## YACK N 913

Kolieskový schodolez s konzolou pre spojenie s invalidným vozíkom pomocou háčikov na mieru

Konfigurácia Yack N 913 sa skladá z nasledujúcich prvkov:

- N 910** Telo schodolezu
- N 9123** Spodná konzola pre uchytenie vozíka
- N 9124** Vrchná konzola na uchytenie
- N 9125** Spodná os

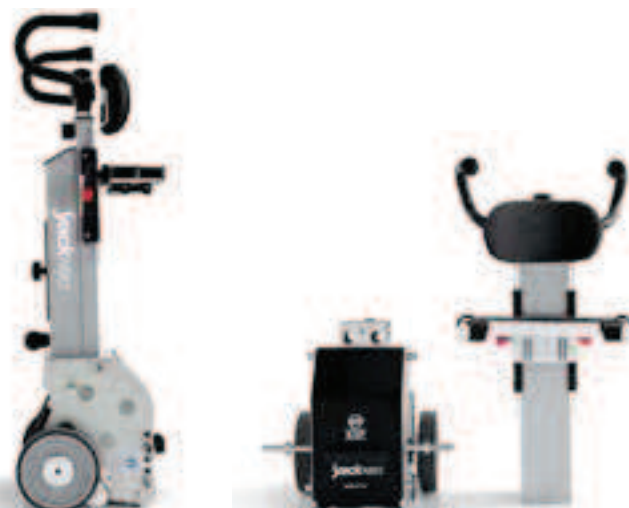

# YACK konfigurácia

## YACK N 911

*Schodolez pre atypické schodiká*

Konfigurácia N 911 je určená na prepravu osôb, ktoré môžu priamo sedieť v kresle schodolezu. Veľmi pohodlné polstrované sedadlo so sklopnými laktóvymi opierkami, opierkou pre nohy a výškovo nastaviteľná opierka hlavy. Zmenšená veľkosť modelu N 911 uľahčuje manévrovanie v úzkych priestoroch. Vďaka možnosti rozloženia na niekoľko častí sa schodolez mimoriadne ľahko preváža.





## YACK N 912

*Kolieskový schodolez s možnosťou používania pre užívateľov na invalidnom vozíku*

Táto verzia má šírko nastaviteľné spodné konzoly pre uchytanie vozíka a ukotvenie k telu schodolezu. Šírkovo a výškovo nastaviteľné horné konzoly pre uchytanie schodolezu k vozíku.

Pohyblivá konzola, umožňuje rýchle umiestnenie a ukotvenie väčšiny invalidných vozíkov na dnešnom trhu.

Všestranné spojovacie konzoly modelu N 912 z neho robia takmer univerzálny schodolez, ktorý umožňuje bezpečne prepravovať osobu na akómkoľvek invalidnom vozíku.

Praktické a veľmi jednoduché použitie sa ľahko prenáša vďaka možnosti rozobrať ho na dve časti.



# YACK Konfigurácia

## YACK N 913

*Najrozšírenejšia konfigurácia kolieskového schodolezu so širokou variabilitou použitia*

Táto konfigurácia je vybavená spodnou tyčou a hornou posuvnou konzolou pre uchytenie vozíka. Toto riešenie umožňuje rýchle pripnutie vozíka o schodolez.

Navyše vám to umožňuje bežne používať invalidný vozík na rovnom povrchu a súčasne udržiavať schodiskový výťah pripevnený. Ak je potrebné čeliť rebríku, stačí jednoduchým manévrom demontovať kolesá invalidného vozíka a tiež zmenšiť zaťaženie, čím sa uľahčí manévrovateľnosť.

N 913 je najuniverzálnejší z rady Yack, s radom príslušenstva, je možné ho rýchlo prekonfigurovať na N912, alebo N911.

V konfigurácii YACK N 913 sa schodolez stáva ľahko použiteľné variabilné zdvíhacie zariadenie. Obsahuje technológiu pripájania s extrémnou jednoduchosťou pre mnoho typov invalidných vozíkov a umožňuje ich prenosnosť na veľmi úzkych schodoch a so zmenšeným manévrovacím priestorom, pretože umožňuje aj jednoduché odňatie kolies z invalidného vozíka čím sú celkové rozmery znížené na minimum. Schodolez sa ľahko rozdeluje na viacero častí, ktoré sú sami o sebe ľahké. Preto sa ľahko prepravuje, aj skladuje.

## YACK Vás zoberie kamkoľvek

Po namontovaní sa zo schodolezu stane jediné kompaktné telo, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou samotného invalidného vozíka. Nie je potrebné ho demontovať pri presune po rovnej ploche.

Pri udržiavaní polohy mierne nad zemou sa N 913 môže pohybovať s invalidným vozíkom a je vždy pripravený čeliť akejkoľvek prekážke, ktorá by mohla pri ceste vzniknúť.




# YACK

## Try v jednom

Všetky verzie kolieskového schodolezu YACK používajú rovnaké telo. Vďaka ľahko použiteľnému príslušenstvu je možné prispôsobiť schodolez pre širokú škálu využitia. Je veľmi jednoduché demontovať posuvné rameno N 913, vymeniť ho za operadlo a umiestniť sedadlo čím ho v podstate premeníte na N 911. Podobným spôsobom je možné pripevniť posuvné rameno a konzoly na pripojenie invalidného vozíka, čím vznikne verzia N 912.

Vďaka tejto dôležitej vlastnosti je tento schodolez schopný prispôsobiť sa meniacim sa potrebám jeho používateľov. Je to skutočný príklad „technológie v pohybe“, ktorí sa neustále „vyvíja“ v snahe uľahčiť prekonanie každej bariéry.

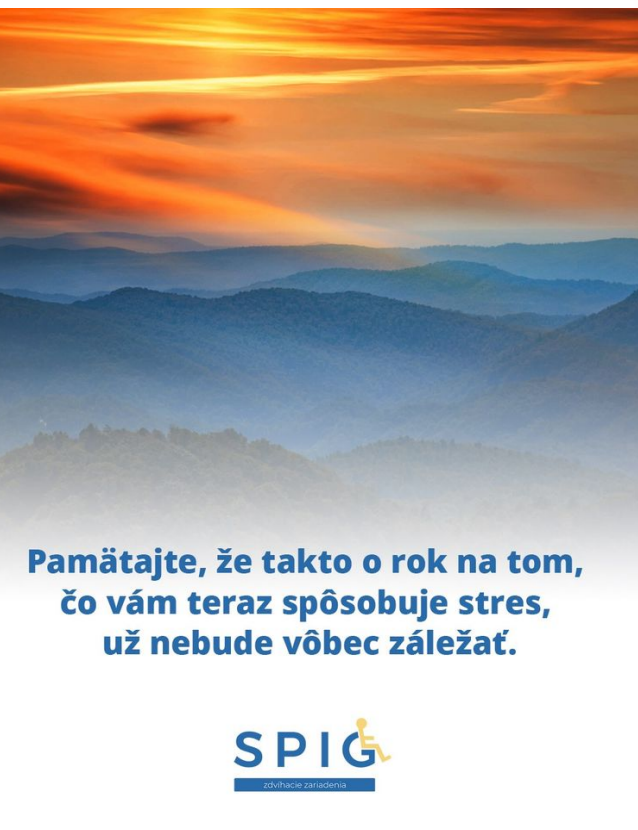

**Pamätajte, že takto o rok na tom, čo vám teraz spôsobuje stres, už nebude vôbec záležať.**



# YACK

## Konfigurácia **N 912**

*Kolieskový schodolez pre mechanický vozík*



# YACK

## Konfigurácia N 913

*Kolieskový schodolez pre upínanie mechanického vozíka.*



# YACK

## Konfigurácia N 911

*Kolieskový schodolez s integrovaným sedátkom.*



[www.spig.sk](http://www.spig.sk)  
[www.schodolezy.eu](http://www.schodolezy.eu)

Bezplatná linka  
0800 105 707



Vybavený dvojitým ovládaním, aby sa zabezpečila ľahšia prevádzka pre obsluhu.



ZAP / VYP kľúčikom. V prípade dlhodobého nepoužívania aktivuje funkciu spánkového režimu (pohotovostného režimu) signalizovanú akustickým alarmom. Rýchle vytiahnutie kľúčika umožňuje okamžité núdzové zastavenie pohybujúceho sa schodolezu.




Externá elektronická nabíjačka batérií. Možnosť nabíjania s vloženom stave, alebo samostatne vybratú batériu.



Elektronika riadi činnosť zariadenia a bráni jeho činnosti v prípade, že podmienky používania nie sú z hľadiska bezpečnosti optimálne, napríklad nedostatočná energia v batériách, alebo prekročené zaťaženie schodolezu, ktoré presahuje maximálnu povolenú kapacitu.

Vďaka špeciálne navrhnutému ovládacímu panelu je mimoriadne jednoduché nastaviť jednu zo 4 poskytovaných rýchlostí, zvoliť prevádzkový režim medzi jedným režimom a nepretržitým režimom a monitorovať stav batérií.

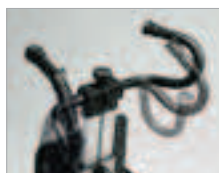

**N 911 / N 912 / N 913**  
Nastaviteľná rukoväť, ktorá umožňuje 7 polôh pre najvhodnejšie ovládanie.




**N 911 / N 912 / N 913**  
Nastaviteľná poloha rúčok slúži pre nastavenie optimálnej polohy.



**N 911 / N 912 / N 913**  
Automatické brzdy na konci stupňa. Bezpečný mechanický systém zabezpečuje, aby YACK automaticky zabrzdil na konci každého schodiskového stupňa.



**N 911 / N 912 / N 913**  
Ergonomicky umiestnená spojka v tvare kolieska pre ľahké a rýchle použitie pri rozoberaní schodolezu.

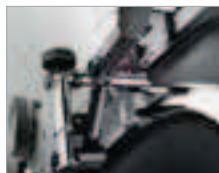

**N 912 / N 913**  
Nastaviteľná šírka a výška vrchnej konzoly pre upnutie ivladiného vozíka umožňuje uchítenie akéhokoľvek vozíka.



**N 912 / N 913**  
Horná konzola s nastaviteľnou šírkou a výškou pre rýchle a ľahké uchopenie akéhokoľvek vozíka



**N 911**  
Vychýňavajúce kolesá s povolenou brzdou zdvih vozidla na rovnom povrchu.



**N 911**  
Sklopné opierky rúk



**N 911**  
Sklopná opierka nôh



**N 912**  
Konzola pre uchopenie vozíka



Opis		N 911	N 912	N 913
hmotnosť celého schodolezu	Kg.	43	41	37,2
hmotnosť ramena	Kg.	7,1	7,1	7,1
hmotnosť pohonu	Kg.	23	23	23
Hmotnosť konzoly na uchopenie vozíka (N 913)	Kg.	-	-	2,6
Hmotnosť podnožky a konzoly invalidného vozíka (N 912) konzola pre pripojenie invalidného vozíka N 913)	Kg.	-	6,4	-
sedadlo s podnožkou (N 911)	Kg.	5,1	-	-
Hmotnosť operadla (N 911)	Kg.	3,3	-	-
Hmotnosť odnímateľnej batérie	Kg.	4,5	4,5	4,5
Maximálna hmotnosť plne naloženého schodolezu	Kg.	173	171	167,2
Maximálna nosnosť	Kg.	130	130	130
Maximálna výška schodu	cm.	21	21	21
Hĺbka	cm.	63	50	37
Šírka	cm.	51	60 – 68	44 – 63
Výška min	cm.	116	116	116
Výška max	cm.	152	152	152
Minimálny manévrovací priestor	cm.	70x70	80x80	80x80*
Minimálna šírka schodiska	cm.	80	90	90*
Výkon motora	W	220	220	220
Spotreba energie počas nabíjania	W	50	50	50
Otáčky motora	RPM	2500	2500	2500
Odporúčaná teplota, pre používanie a skladovanie	°C	-10 +50	-10 +50	-10 +50
Maximálna rýchlosť	počet schodov za minútu	12	12	12
Napájanie motora	V	24	24	24
Napájanie nabíjačky	V	110-230	110-230	110-230
Maximálny počet schodov na jedno nabitie	počet schodov	500	500	500
Pracovný rozsah v rezervnom režime	počet schodov	20	20	20







Pre tých najdôležitejších v našich životoch: **Všetko najlepšie.**



## Kolieskový schodolez Yack používanie

YACK bol stvorený preto, aby bol schopný presúvať osobu hore-dole po akomkoľvek type schodiska. Je vhodný aj pre to najužšie, napríklad točité, vejárovité schodisko. Dokáže prekonať dokonca schodisko, ktoré má každý schod iný...

Vyžaduje značne zmenšený manévrovací priestor v porovnaní s pásovým schodolezom.

Vďaka starostlivému výberu kvalitných materiálov a použitej pokrokovej elektronickej technológii je výrobok mimoriadne rafinovaný, spoľahlivý a bezpečný.

Elegantný dizajn, je kombináciou jednoduchej ovládateľnosti a vysokého pohodlia. Certifikované, patentované riešenie.

**Kolieskový schodolez YACK je vhodné si vyskúšať**

**Bezplatné odskúšanie schodolezu je možné po kontaktovaní spoločnosti SPIG, s.r.o**

**telefonicky: 0800 105 707 , alebo emailom: spig@spig.sk**

*Príklad používania kolieskového schodolezu Yack krok po kroku.*

